


BE8054

繁體中文

BE2021 Maxi Pro 個人交流器 (專業版)

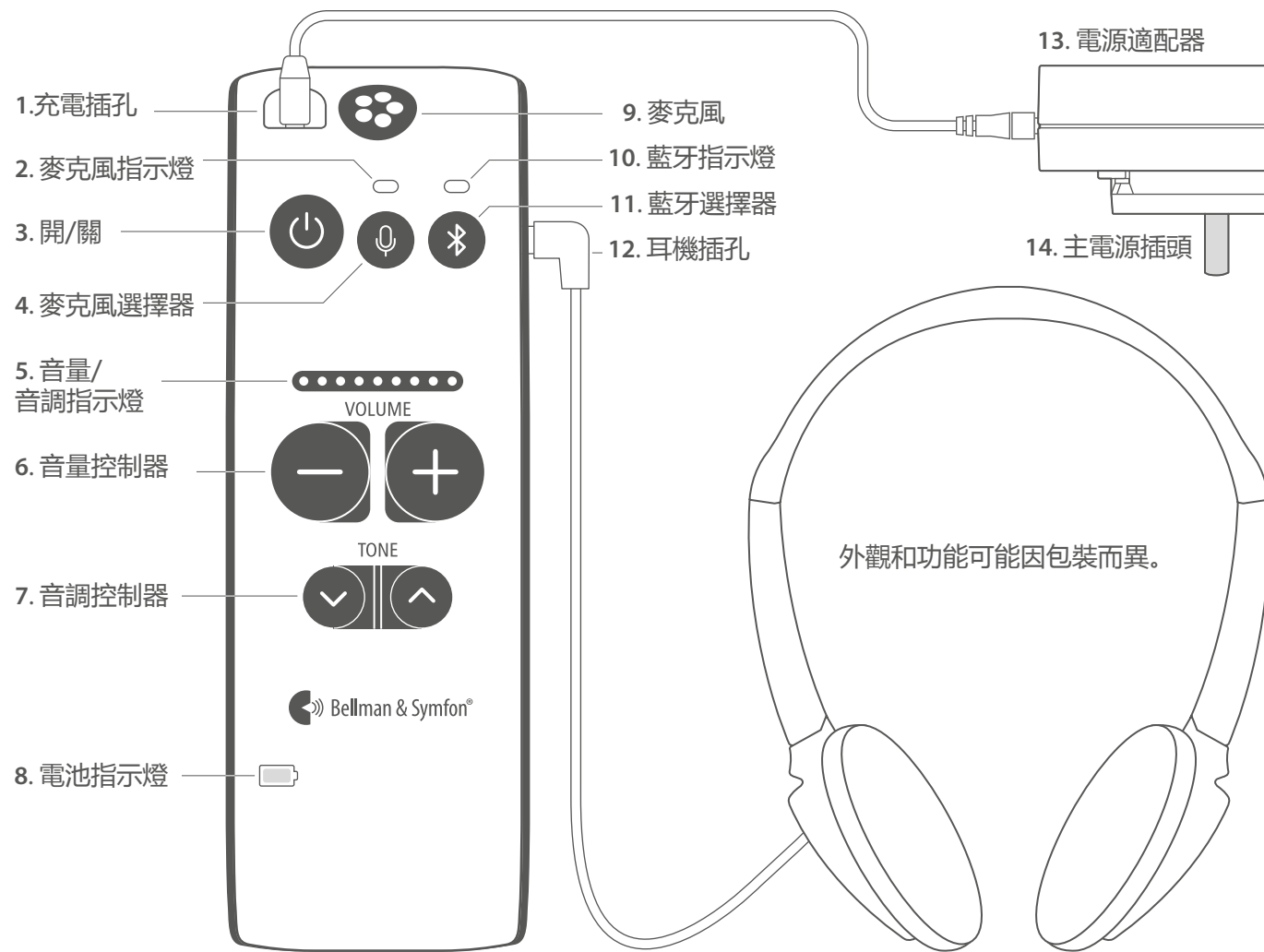

關於 Maxi Pro

Maxi Pro 是一款數字型語音擴大器，可洪亮、清晰地放大人語聲。當您在餐廳就餐、使用手機和收看電視時，可以使用 Maxi Pro 增強語音效果。

開始操作

第 1 步：對 Maxi Pro 充電

- 1 將充電線連接至電源適配器(13)和 Maxi Pro 的黃色充電插孔 (1) 處。
- 2 將主電源插頭 (14) 連接至電源適配器 (13)，檢查是否正確鎖定，然後將其連接至電源插座。
- 3 充電時，電池指示燈(8) 閃爍綠色。在大約 3 小時後，將持續亮起綠燈，這表明 Maxi Pro 已完全充好電。

第 2 步：連接 Maxi Pro

將附帶的頭戴式耳機、入耳式耳塞或環頸圈連接至 Maxi Pro 的綠色耳機插孔 (12) 處。

第 3 步：啟動 Maxi Pro

按下 開/關 按鈕 (3) 大約 1 秒鐘啟動 Maxi Pro。麥克風指示燈 (2) 亮起綠燈，音量/音調指示燈 (5) 顯示當前音量 3 秒鐘。

如要關閉 Maxi Pro，請按住 開/關 按鈕 (3) 大約 3 秒鐘，直至所有指示燈熄滅。

使用 Maxi Pro 增強語音

Maxi Pro 配有一台可增強語音效果的內置全向麥克風(9)。可將 Maxi Pro 放置在講話人附近的桌面上，手持或者使用夾子將其夾在衣服上。

調節音量

使用音量控制器 (6) 上的 **+** 增加音量，使用 **-** 減小音量。可分 9 個級別調節麥克風音量，分 15 個級別調節電視機與手機音量。聲級在音量/音調指示燈 (5) 上顯示。

注：每次打開 Maxi Pro 時，將音量調低，以免出現令人不適的音量。

調節音調

按下音調控制器 (7) 上的 **^** 提高高音，按下 **v** 降低高音。可分 5 個級別調節高音，音調在音量/音調指示燈 (5) 上顯示。

注：增加高音使得 S, F 和 T 发音聽起來更加明顯，更容易辨認。

使用 Maxi Pro 與手機連接

配對

- 1 通過按下麥克風按鍵 (4) 來確保 Maxi 工作在麥克風模式。
- 2 按住 Maxi Pro 藍牙選擇器 (11)，直至藍牙指示器 (10) 閃爍藍燈。
- 3 確保手機上的藍牙開啟。打開藍牙菜單，並在清單中選擇 "Maxi Pro"。
- 4 藍牙指示燈將持續顯示藍色，這表明配對成功。

注：您的手机与 Maxi Pro 斷開連接時，您需要重複 3, 4 步驟。

接聽電話

- 1 當手機鈴聲響起時，Maxi Pro 指示燈 (10) 將閃爍藍色。其他所有聲音將保持靜音，您將會聽到耳機內的響鈴信號。
- 2 如要接聽電話，按下 Maxi Pro 的藍牙選擇器(11) 或者使用耳機上的遙控裝置。此時，您將會在耳機內更好地聽到來電聲音，您的聲音將由 Maxi Pro 麥克風或耳機上的遠端麥克風拾取。
- 3 如要拒絕來電，按住 Maxi Pro 藍牙選擇器。

注：如要拒絕來電，按住 Maxi Pro 藍牙選擇器 3 秒。

打電話

當你用電話通話時，你從耳機裡面聽到被放大的對方的聲音，你的聲音將會被 Maxi 麥克風拾取。

播放音樂

在您的手機上播放音樂，然後按下 Maxi Pro 藍牙選擇器 (11)，直到聽到音樂聲音。

使用耳機的麥克風

當您使用耳機通話時，將從耳機遠端麥克風拾取聲音。

使用 Maxi Pro 收聽電視

要聽電視上播放的聲音，你需要一個 Maxi Pro TV streamer，請看另外一份的 TV Streamer 的使用說明書。

收聽電視機聲音

打開電視機，選擇一檔節目，然後按下 Maxi Pro 藍牙選擇器 (11)，直到聽到電視播放聲音。

注：如果在觀看節目時有電話呼入，則電視機的聲音將會靜音，這樣您可以清晰聽到來電者的聲音。

掛斷電話時，電視機的聲音將自動恢復。

自動重連


Maxi 將會在它在有效連接範圍內自動重連到你的 TV streamer，所以你可以帶着 Maxi 去拜訪家人和朋友而免去重新配對的麻煩。

電池與充電

Maxi Pro 配備最長可持續 70 小時的內置充電電池。當電池指示燈 (8) 開始閃爍紅燈時，應及時為電池充電，請見對 Maxi Pro 充電。

連接夾子

如要連接夾子，將夾子頂靠背蓋，然後用力按壓直至其鎖定。如要拆下夾子，將圓形手柄從滑塊中拉出。

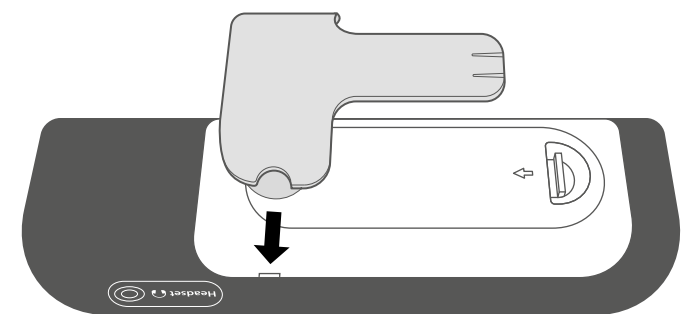

故障排除

可通過執行下方建議快速解決大多數問題。

問題	解決方法
我無法透過藍牙讓設備配對。	<ul style="list-style-type: none">透過按壓麥克風選擇器，確保您的 Maxi 已處於麥克風模式 (4)。請按照配對章節中的以下步驟嘗試重新配對設備。
按下開關鍵沒有反應。	<ul style="list-style-type: none">電池電量耗盡。對 Maxi Pro 充電，請見對 Maxi Pro 充電。
Maxi Pro 電池指示燈閃爍紅燈。	<ul style="list-style-type: none">電池電量低。對 Maxi Pro 充電，請見對 Maxi Pro 充電。
在開機狀態下，耳機沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">首先，確保音量達到要求的水平。然後檢查耳機插頭是否正確連接到Maxi耳機插孔 (12)。按下 Maxi Pro 音量控制器 (12) 上的 + 提高音量。將耳機連接至另外一台設備（例如：智能手機），然後檢查是否聽到任何聲音。否則，可能需要更換耳機。如果選擇藍牙模式，應確保電視伴侶 或手機在範圍內、已配對播放聲音。
耳機無法聽到手機的聲音。	<ul style="list-style-type: none">確保手機上的藍牙開啟，並且與 Maxi Pro 配對，請見使用 Maxi Pro 與手機連接章節中的配對。
耳機未聽到電視機的聲音。	<ul style="list-style-type: none">確保電視伴侶在範圍內並且與 Maxi Pro 配對，請見使用 Maxi Pro 收聽電視章節中的配對。
Maxi 的音量即使調到最大了，還很小聲。	<ul style="list-style-type: none">試着增大電視或者手機的輸出音量。
耳機上聽到尖銳噪音。	<ul style="list-style-type: none">降低音量或者增加 Maxi Pro 與耳機之間距離。將 Maxi Pro 內置麥克風 (9) 對準其他方向。
Maxi Pro 沒有反應/死機。	<ul style="list-style-type: none">按下開/關按鈕 (3) 大約 10 秒鐘關閉 Maxi Pro。按下開/關按鈕大約 1 秒鐘再次啟動 Maxi Pro。

保養與維護

使用產品

注意: Maxi Pro 能夠產生很大的聲壓，請小心使用，請逐漸增大音量到一個比較舒適的聲音。在高聲壓情況下，容易損壞你的聽力。

確保一些小部件遠離兒童接觸到的地方。

請在 0 -35 攝氏度的乾燥環境中使用本產品。

清潔

使用一塊柔軟的無絨布清潔產品。避免機器受潮。請勿使用化學物品清潔。

保養與質保

如果產品出現損壞跡象或者無法正常工作，請遵循本手冊中的使用說明。如果產品依舊無法正常運行，請聯繫您當地的經銷商，了解保養與質保信息。

BE2022 Maxi Pro 電視伴侶




關於電視伴侶

Maxi Pro 與電視伴侶完美配合,通過藍牙接收到全立體聲,可使您以適合自己且不會影響他人的音量收聽電視。(單獨售賣)

包裝清單

除了電視伴侶之外,還包含下列物品:

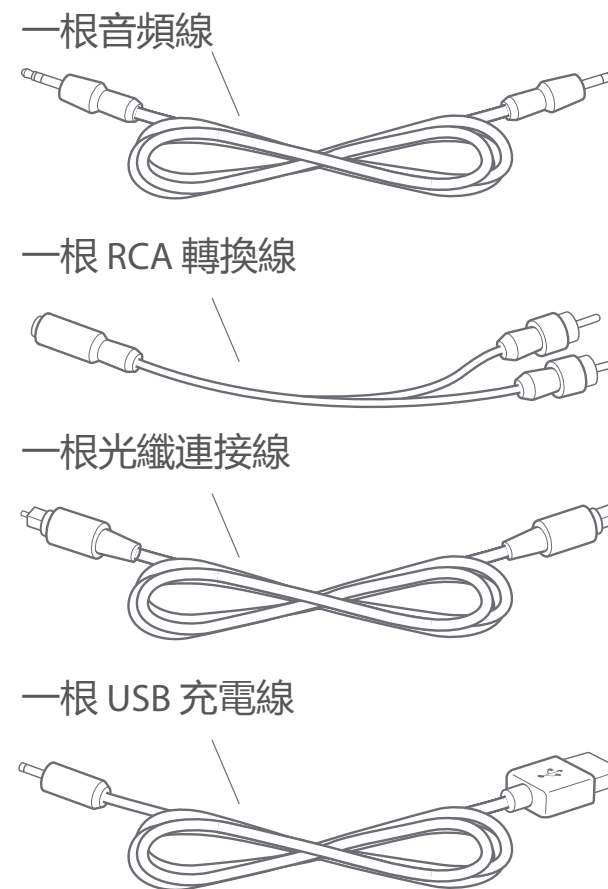


啟動所需物件

為了設置電視伴侶您還需要:

一台帶有 RCA, 耳機或光纖音頻端口的電視機

一台 Maxi Pro 個人輔聽器 (專業版)

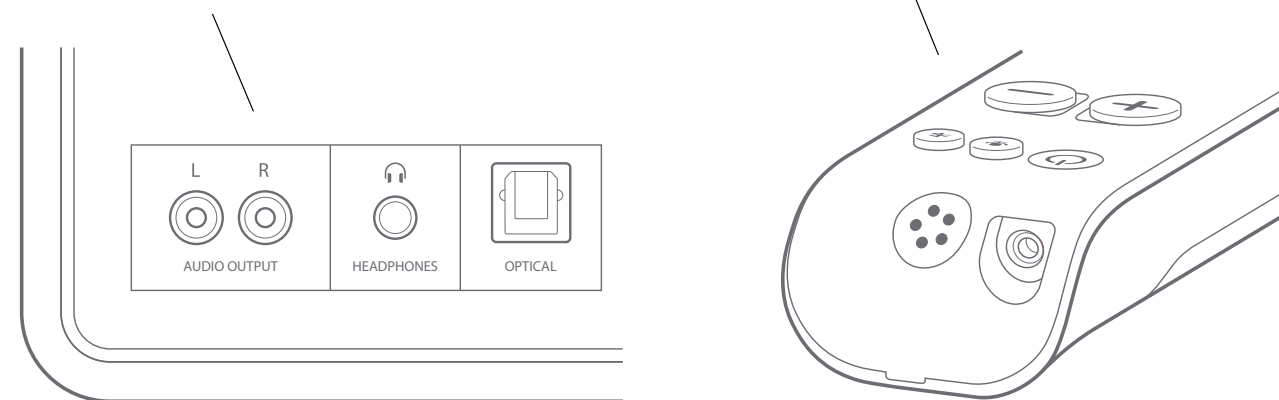

設置電視伴侶


第 1 步：連接音頻

有許多方法可將電視伴侶連接至電視機。這取決於電視機配備的音頻端口類型。

使用電視機的 RCA 輸出

- 1 將音頻線的一端連接至位於電視伴侶背部的音頻輸入。
- 2 將另一端連接至 RCA 轉換線上。
- 3 RCA 插頭連接至電視機上的音頻輸出。

注：您也可將音頻線直接連接至電視機上的耳機輸出。請注意，這有可能將某些型號電視機上的揚聲器靜音。

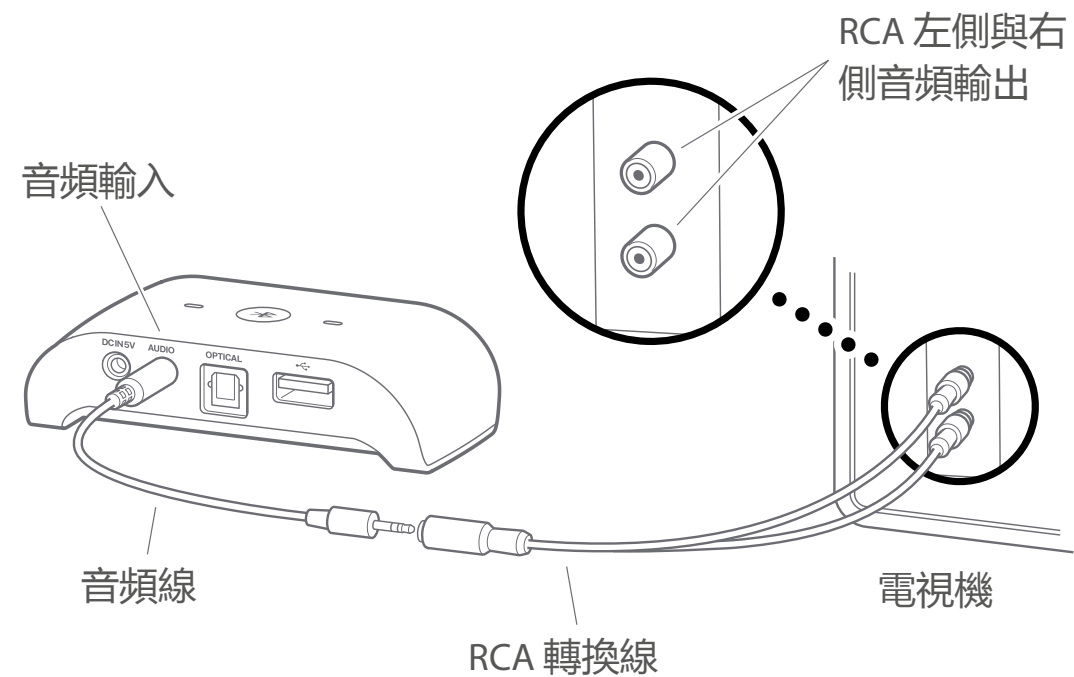


使用電視機的光纖輸出

如果電視機上配備光纖輸出，則可使用光纖連接線將電視伴侶連接至電視機。以下為連接方法：

- 1 將光纖連接線的一端連接至位於電視伴侶背部的的光纖輸入口。
- 2 將另一端連接至電視機上的光纖輸出。


光纖連接線

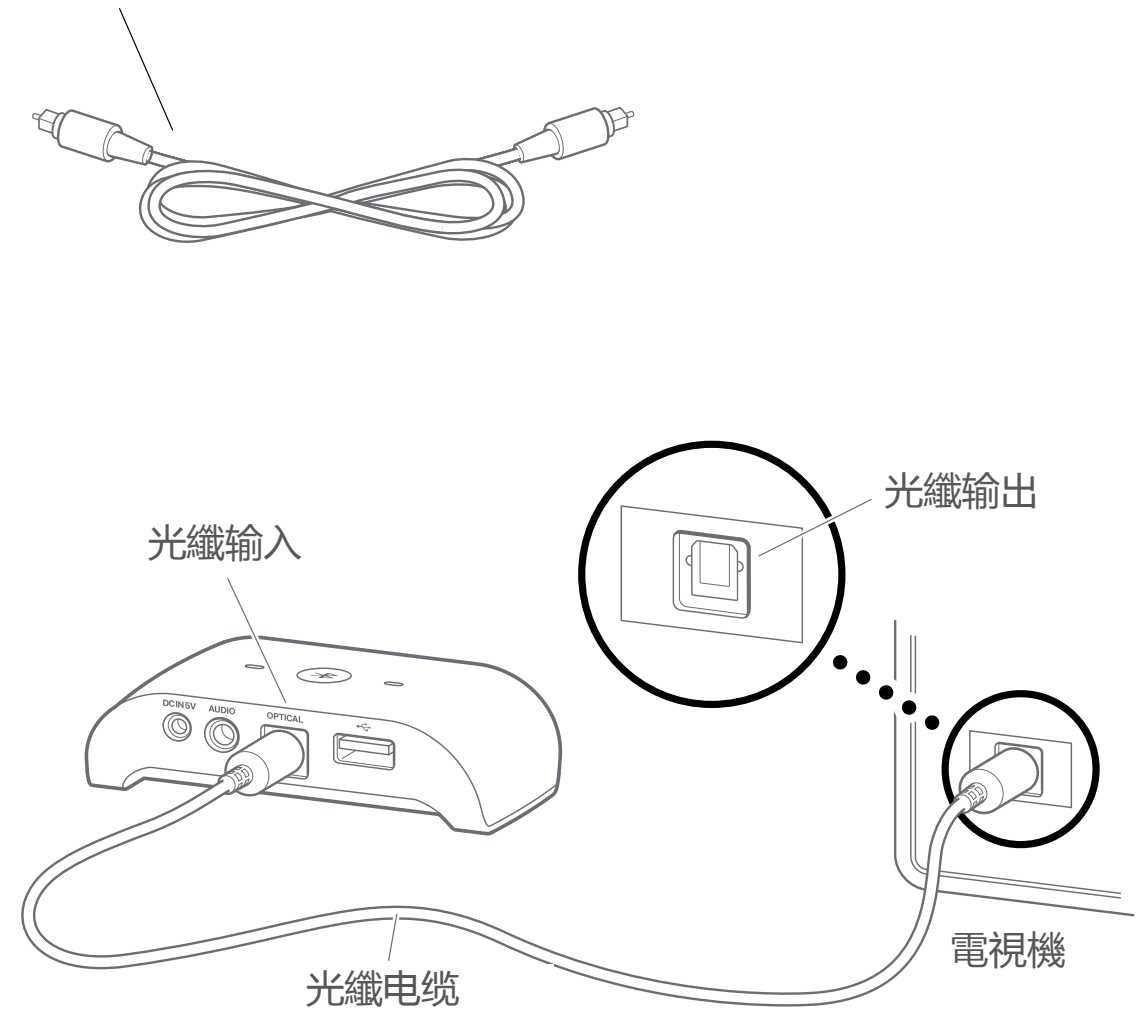

第 2 步：連接電源線

- 1 將電源線的圓形插頭連接到電視伴侶的後面對應的電源輸入。
- 2 將電源線 USB 端連接到 Maxi Pro 電源適配器。
- 3 將適配器插頭安裝到電源適配器並將其連接到電源插座上，電視伴侶的電源指示燈就會亮起綠燈。

注：您也可以通過將電源線 USB 端連接到電視 USB 端口來為其供電。但是，這可能會在重連期間聽不到電視聲音。

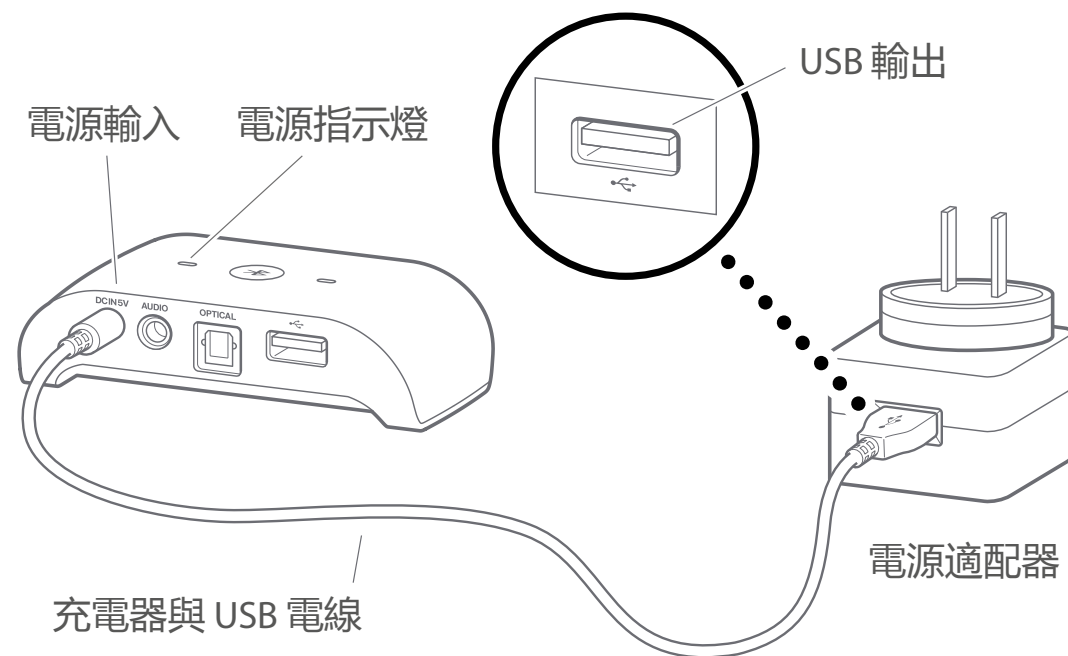

第 3 步：配對

注：如果購買來的 TV Streamer 和 Maxi Pro 是在同一個包裝盒內，則不需要再去配對。

- 1 在 TV streamer 端：按住藍牙按鍵直到藍色指示燈閃爍。
- 2 在 Maxi Pro 端：按下麥克風按鍵，然後按住藍牙按鍵直到藍色指示燈閃爍。
- 3 兩盞藍牙指示燈均持續顯示藍色，這表明配對成功。

使用電視伴侶


只要您的電視伴侶連接著電源，它將會一直處於開機狀態，當您回到藍牙連接範圍時將自動重連到您的 Maxi Pro。連接設備後，藍牙指示燈都將亮起藍燈。

注：如果您通過電視為您的電視伴侶充電，當您打開電視時，它將會自動開機並在 10 秒內重連到您的 Maxi Pro。

對 Maxi Pro 充電

您可使用電視伴侶對 Maxi Pro 進行充電。

- 1 將 Maxi Pro 充電線的 USB 端連接至位於電視伴侶背部的 USB 充電輸出。
- 2 將另一端連接至以黃色標記的 Maxi Pro 充電器插孔。
- 3 充電時，Maxi Pro 電池指示燈閃爍綠色。在大約 3 小時後，將持續亮起綠燈，這表明已完全充好電。

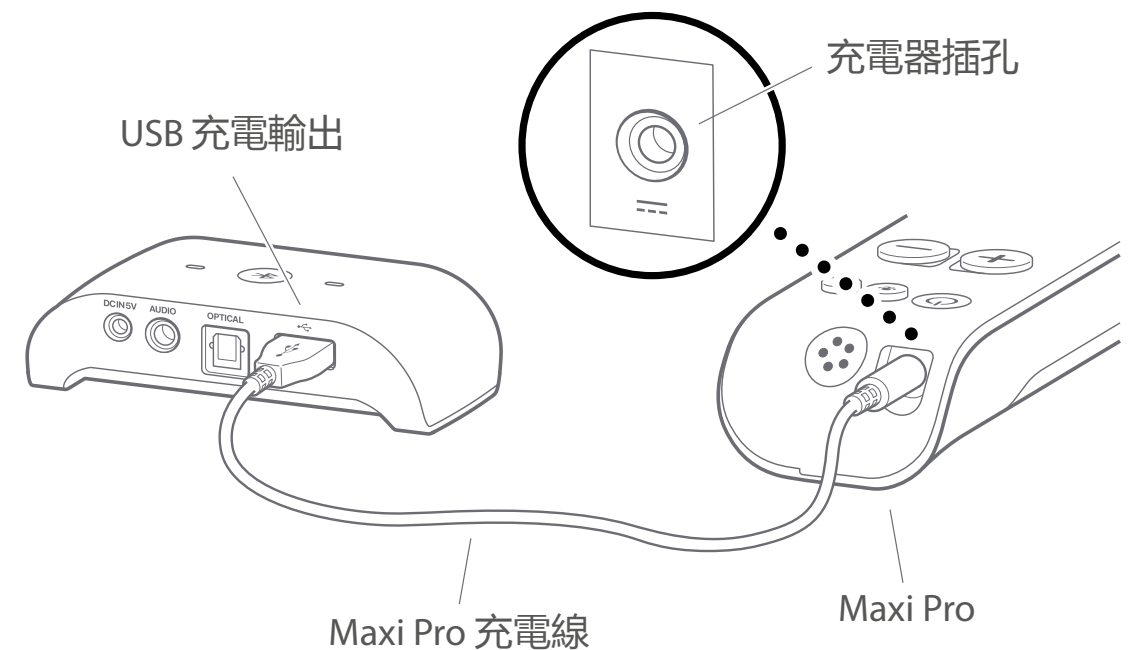

故障排除

可通過執行下方建議快速解決大多數問題。

問題	解決方法
按下藍牙按鍵無反應	• 確保電視伴侶已與電源連接，請見 連接電源線 。
戴上耳機未聽到電視機的聲音	• 確保 Maxi Pro 在藍牙連接範圍內，並且與電視伴侶配對，請見 配對 。
當音頻線連上耳機時，電視聲音消失	• 這是一些型號電視機的特點。 • 改用電視機上的 RCA 或光學輸出，請見 連接音頻 。

保養與維護

請在 0 – 35 攝氏度的乾燥環境中使用本產品。

使用一塊柔軟的無絨布清潔產品。避免機器受潮。請勿使用化學物品清潔。

如果產品出現損壞跡象或者無法正常工作，請遵循本手冊中的使用說明。如果產品依舊無法正常運行，請聯繫您當地的經銷商，了解保養與質保信息。

DESIGN FOR EARS™

歐洲總部

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30,
436 32 Askim
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.com

亞太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区环市东路 339 号
广东国际大厦主楼 1401-06 室
邮编：510095
电话：020 8318 2950
传真：020 8333 5528
邮箱：info.cn@bellman.com

© 2020 Bellman & Symfon AB, 保留所有權利。Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 的商標以為 Bellman & Symfon 註冊。



微信公眾號



Bellman 官網